

ANALIZA BIAŁEK



100013072

Laboratorium Analizy

Klient: SLAVIC LABS
Numer zamówienia: 100013072
Nazwa: SLAVIC LABS WOLVERINE STACK
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2026-03-04
Data rozpoczęcia: 2026-03-20
Data zakończenia: 2026-03-23

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Arg BPC-157 + TB-500	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Arg BPC-157	SLAVIC LABS WOLVERINE STACK 5/5 MG	5,27mg	-----
TB-500	SLAVIC LABS WOLVERINE STACK 5/5 MG	5,30mg	-----

Komentarz do badania

Badane próbki naniesiono w ilości 10ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawiły się piki szukanych substancji. Ich stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego przedstawia tabela powyżej. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

WT56YH89


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

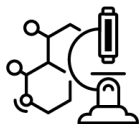

Chromatogram 3

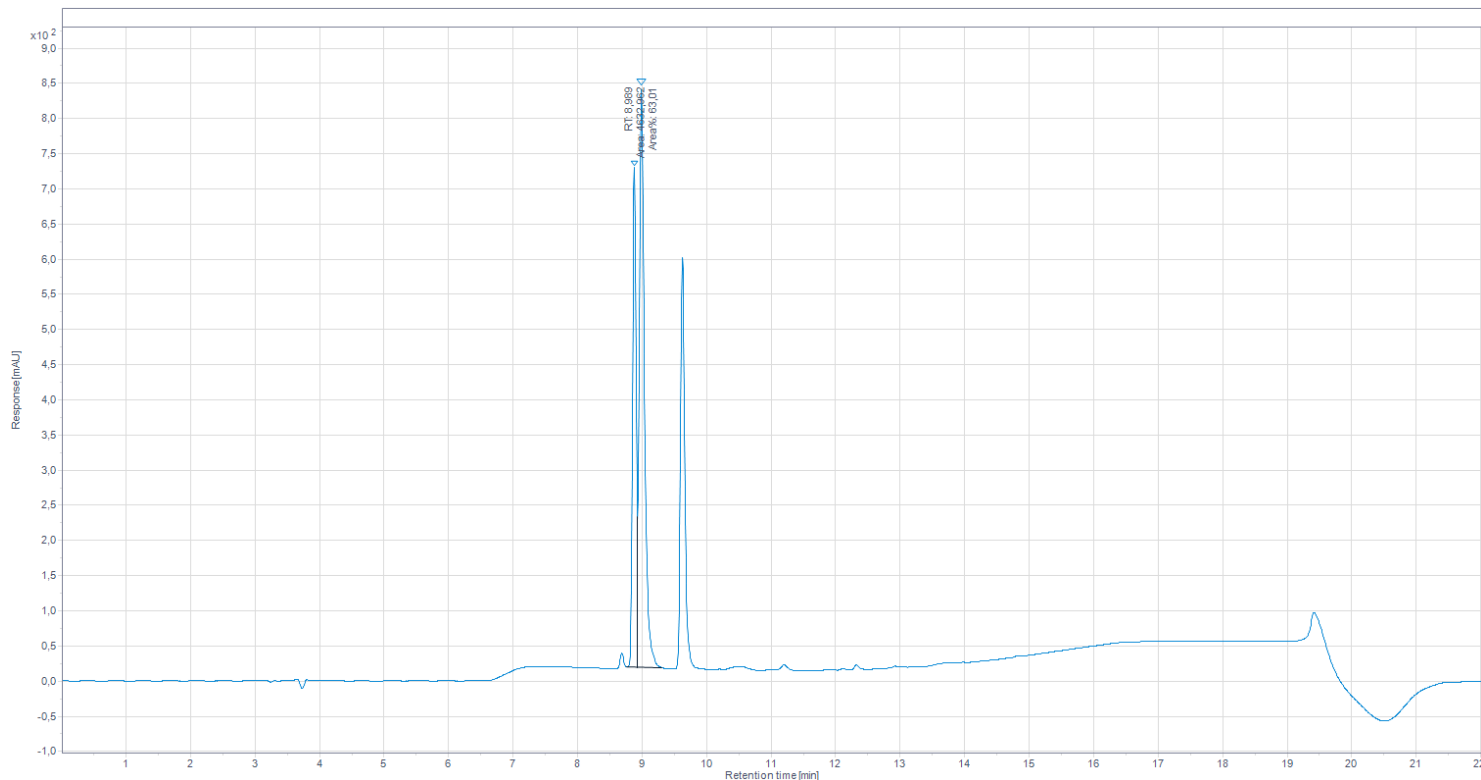

Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

Hasło dostępu

WT56YH89