

ANALIZA BIAŁEK



100015981

Laboratorium Analizy

Klient: Slavic Labs
Numer zamówienia: 100015981
Nazwa: SLAVIC LABS CJC-1295 NO DAC
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: 2026/05/18
Data przyjęcia: 2026-07-08
Data rozpoczęcia: 2026-07-13
Data zakończenia: 2026-07-21

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
CJC-1295 without DAC	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
CJC-1295 without DAC	SLAVIC LABS CJC-1295 NO DAC 5MG	4,87mg	99%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3 µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 4,87mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

B3W12Q9P

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

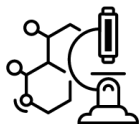


ANALIZA BIAŁEK



100015981

Chromatogram

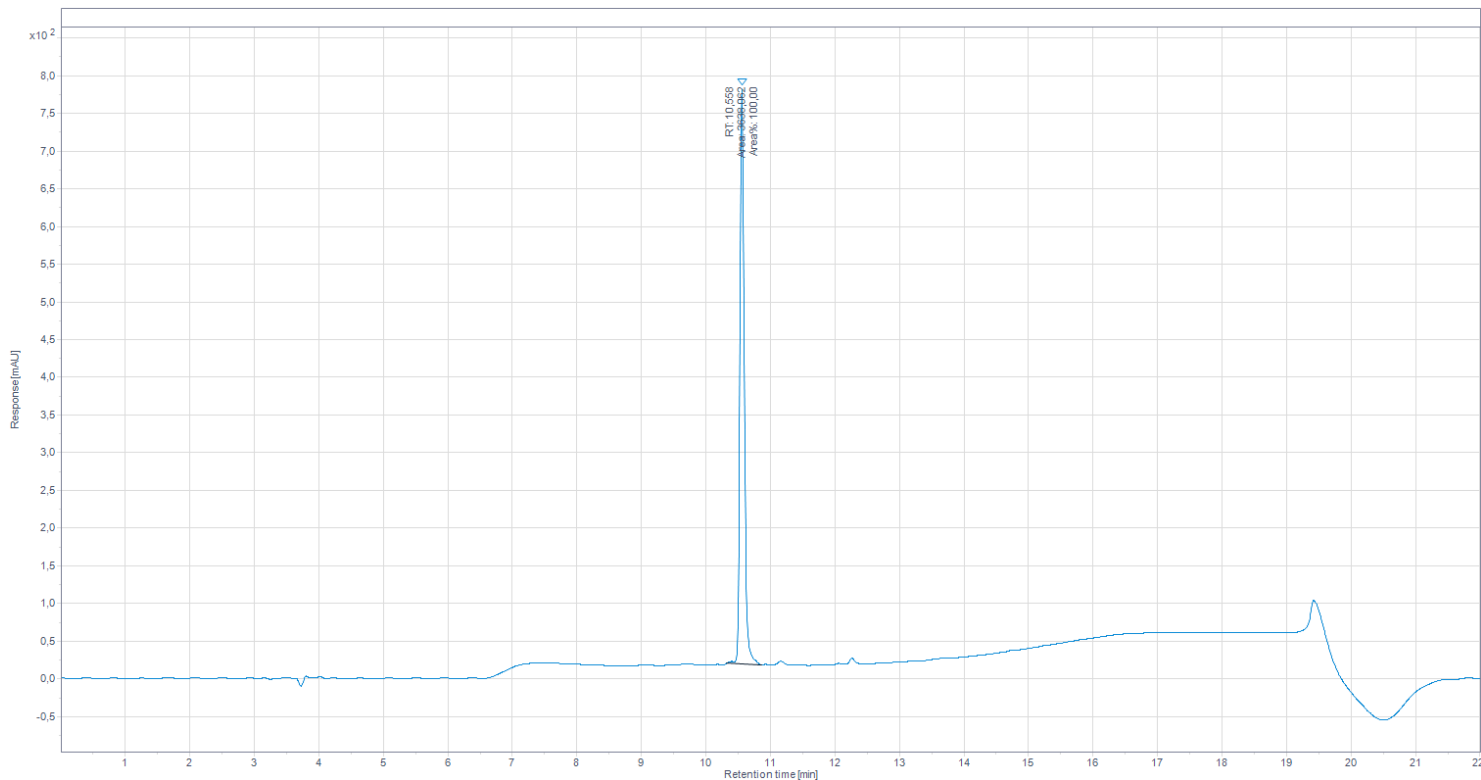

Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

B3W12Q9P

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970


REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac

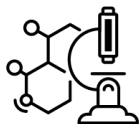

ANALIZA BIAŁEK



100015978

Laboratorium Analizy

Klient: Slavic Labs
Numer zamówienia: 100015978
Nazwa: SLAVIC LABS IPAMORELIN
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: 2026/06/26
Data przyjęcia: 2026-07-08
Data rozpoczęcia: 2026-07-13
Data zakończenia: 2026-07-21

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Ipamorelin	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Ipamorelin	SLAVIC LABS IPAMORELIN 5MG	5,47mg	99%

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3 µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 5,47mg. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

Y6U53C1M

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając

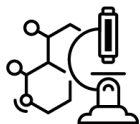


ANALIZA BIAŁEK



100015978

Chromatogram

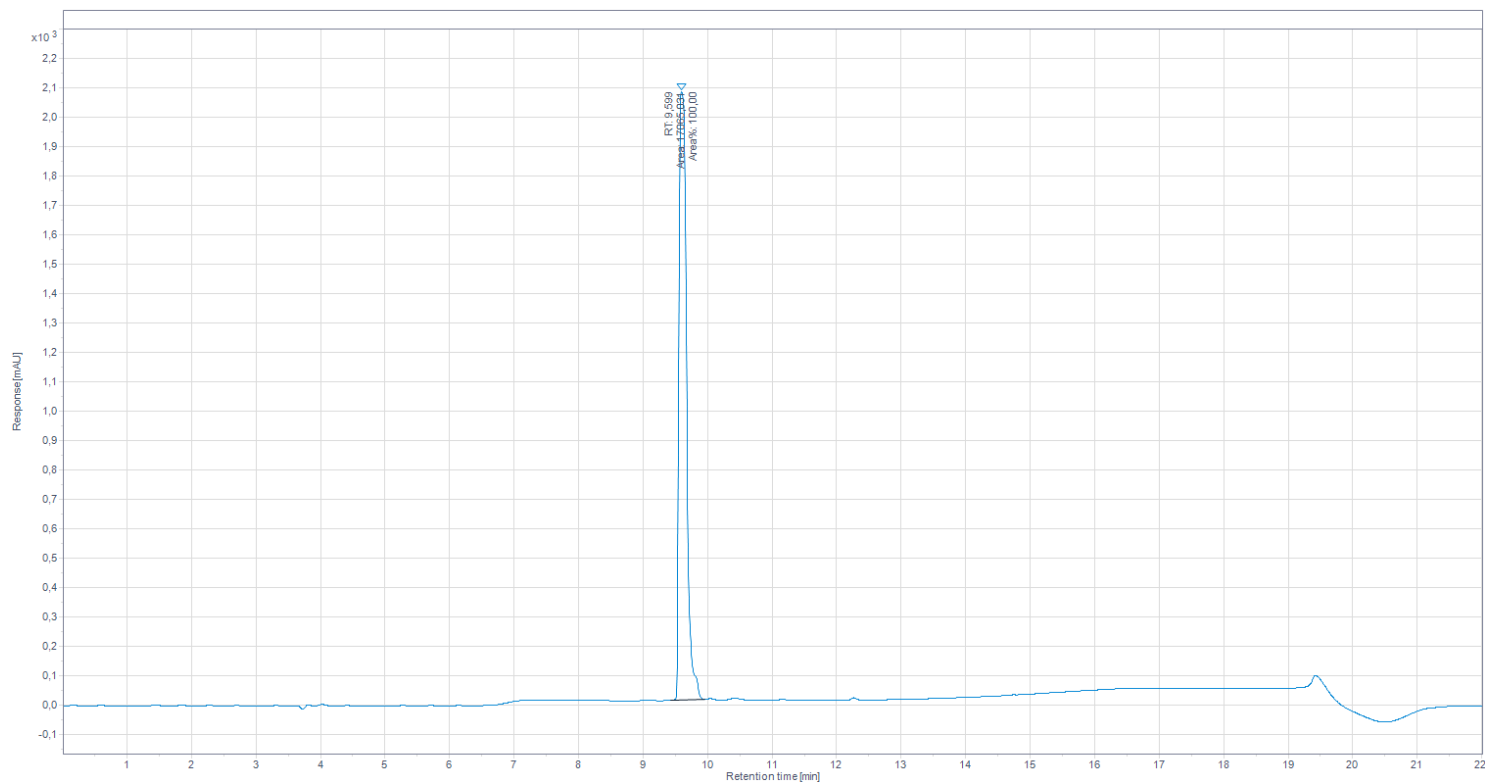

Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

Y6U53C1M

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac